

The GlideRite® Single-Use Stylet (Small) was designed to help enable the placement of an endotracheal tube (also known as an *ETT* or *ET tube*). The rigidity of this stylet helps the user manipulate the tube as desired for intubation. The stylet is for use in ET tubes between 3.0 and 4.0 mm in internal diameter. *Note: There is no guarantee that instruments selected solely using these instrument dimensions will be compatible in combination.*

Statement of Intended Use

The GlideRite Single-Use Stylet (Small) is an intubation-assist tool intended for use by qualified medical professionals, for guiding an endotracheal tube past the vocal cords into the trachea, shaped to work with GlideScope® video laryngoscope products.

Statement of Prescription

Caution: Federal (U.S.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

⚠️ WARNINGS
<ul style="list-style-type: none">Inspect before use—do not use if product or packaging is damaged. Do not allow the stylet to protrude beyond the distal end of the ET tube. Do not allow the stylet to advance into the glottis or past the vocal cords. Single use only. Do not reuse, reprocess, or sterilize.

Instructions for Use

- Read all instructions before using the stylet.
- Remove the stylet from its protective package.
- Load a standard ET tube onto the stylet.
- Slide the stylet into the tube until the distal end of the stylet is just inside the distal end of the tube.
- Slide the stopper into position in the tube, so that the distal end of the stylet cannot pass the distal end of the tube.



- Position the distal end of the ET tube visually above the vocal cords. Do not advance the stylet past the vocal cords.
- When the ET tube is engaged in the glottic opening, use your thumb to disengage the stopper and retract the stylet.
- Position the ET tube per standard practice.
- Remove the stylet from the ET tube.
- Examine the stylet for damage, and then dispose of it.

Storage Ranges

Temperature –20–45 °C (–4–113 °F) Humidity 10–95% Atmospheric Pressure 595–1060 hPa

Symbol Definitions

For a full glossary of symbols used by Verathon, visit verathon.com/symbols.

California Residents — For Proposition 65 information, visit: Verathon.com/Prop65

Produktbeschreibung

Der GlideRite® Erweg-Mandrin dient der einfacheren Platzierung eines Endotrachealtubus (auch als *ETT*- oder *ET-Tubus* bekannt). Da dieser Mandrin star ist, kann der Benutzer den Tubus bei der Intubation wie gewünscht bewegen. Der Mandrin ist für den Einsatz mit ET-Tuben mit einem Innendurchmesser zwischen 3,0 und 4,0 mm vorgesehen.

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass Geräte, die nur auf Grundlage dieser Geräteabmessungen ausgewählt wurden, kombinierbar sind.

Erklärung zum Verwendungszweck

Der GlideRite Erweg-Mandrin ist ein Werkzeug zur Unterstützung der Intubation und ist für die Verwendung durch qualifizierte medizinische Fachkräfte vorgesehen, um den Endotrachealtubus an den Stimmbändern vorbei in die Luftröhre einzuführen. Dieser Mandrin wurde für den Einsatz mit GlideScope®-VideoLaryngoskopprodukten entwickelt.

Erklärung zur Verordnung

Vorsicht: Laut US-amerikanischem Bundesgesetz darf dieses Gerät nur an Ärzte oder an Ärzte in deren Auftrag verkauft werden.

⚠️ WARNUNGEN
<ul style="list-style-type: none">Vor Gebrauch kontrollieren – nicht verwenden, wenn das Produkt oder die Verpackung beschädigt ist. Der Mandrin darf nicht über das distale Ende des ET-Tubus herausragen. Schieben Sie den Mandrin nicht in die Glottis oder hinter die Stimmbänder. Nur für den Einmalgebrauch. Nicht wiederverwenden, aufbereiten oder erneut sterilisieren.

Gebrauchsanweisung

- Lesen Sie alle Anleitungen durch, bevor Sie den Mandrin verwenden.
- Entfernen Sie den Mandrin aus seiner Schutzverpackung.
- Laden Sie den ET-Tubus auf den Mandrin.
- Schieben Sie den Mandrin in den Tubus, bis sich das distale Ende des Mandrins genau am distalen Ende des Tubus befindet.
- Schieben Sie den Stopper an die entsprechende Position im Tubus, sodass das distale Ende des Mandrins nicht das distale Ende des Tubus passieren kann.



- Positionieren Sie das distale Ende des ET-Tubus sichtbar über den Stimmbändern. Schieben Sie den Mandrin nicht hinter die Stimmbänder.
- Nach dem Einführen des ET-Tubus in den Glottisspalt lösen Sie mit dem Daumen den Stopper und ziehen den Mandrin heraus.
- Positionieren Sie den ET-Tubus gemäß der gängigen Praxis.
- Entfernen Sie den Mandrin aus dem ET-Tubus.
- Untersuchen Sie den Mandrin auf Beschädigungen und entsorgen Sie ihn dann.

Lagerung

Temperatur –20 à 45 °C (–4 à 113 °F) Luftfeuchtigkeit 10 – 95 % Luftdruck 595 – 1060 kPa

Definitionen der Symbole

Ein vollständiges Verzeichnis der von Verathon verwendeten Symbole finden Sie auf verathon.com/symbols.

In Kalifornien ansässige Personen — Informationen zur Proposition 65 finden Sie unter: Verathon.com/Prop65

Description du produit

Le stylet à usage unique GlideRite® a été conçu pour faciliter la mise en place d'une sonde endotrachéale (également nommée SET ou sonde ET). La rigidité de ce stylet aide l'utilisateur à manipuler la sonde comme il le souhaite pour l'intubation. Le stylet est destiné à être utilisé dans des sondes ET de diamètre intérieur compris entre 3,0 et 4,0 mm.

Remarque : il n'est pas garanti que les instruments sélectionnés uniquement avec ces dimensions d'instrument seront compatibles.

Utilisation prévue

Le stylet à usage unique GlideRite® est un outil d'aide à l'intubation destiné aux professionnels de santé qualifiés. Il permet de guider une sonde endotrachéale au-delà des cordes vocales dans la trachée, grâce à sa forme conçue pour fonctionner avec les vidéolaryngoscopes GlideScope®.

Déclaration de prescription

Attention : la loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif aux médecins ou sur prescription médicale.

⚠️ AVERTISSEMENTS
<ul style="list-style-type: none">Inspectez le produit avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si l'emballage est endommagé. Ne laissez pas le stylet aller au-delà de l'extrémité distale de la sonde ET. Ne laissez pas le stylet avancer dans la glotte ni au-delà des cordes vocales. Système à usage unique. Ne réutilisez, rétretez ou stérilisez pas.

Mode d'emploi

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le stylet.
- Retirez le stylet de son emballage protecteur.
- Chargez une sonde ET standard sur le stylet.
- Faites glisser le stylet dans la sonde jusqu'à ce que l'extrémité distale du stylet soit juste à l'intérieur de l'extrémité distale de la sonde.
- Faites glisser le dispositif d'arrêt en place dans la sonde pour que l'extrémité distale du stylet ne puisse pas dépasser l'extrémité distale de la sonde.



- Positionnez visuellement l'extrémité distale de la sonde ET au-dessus des cordes vocales. Ne poussez pas le stylet au-delà des cordes vocales.
- Lorsque la sonde ET est engagée dans l'entrée de la glotte, dégagez le dispositif d'arrêt et extrayez le stylet avec le pouce.
- Mettez en place la sonde ET conformément à la pratique standard.
- Retirez le stylet de la sonde ET.
- Vérifiez si le stylet est endommagé, puis mettez-le au rebut.

Plages de stockage

Température –20 à 45 °C (–4 à 113 °F) Humidité 10 à 95 % Pression atmosphérique 595 à 1060 kPa

DefinITIONS des symboles

Pour consulter le glossaire exhaustif des symboles utilisés par Verathon, rendez-vous sur verathon.com/symbols.

Résidents de la Californie — Pour les informations relatives à la proposition 65, consultez : Verathon.com/Prop65

Descrizione del prodotto

Lo stiletto di un solo uso GlideRite® ha sido diseñado para ayudar a colocar el tubo endotraqueal (también conocido como TET o tubo ET). La rigidez de este estilete ayuda al usuario a manipular el tubo a voluntad para realizar la intubación. El estilete se debe utilizar en tubos ET con un diámetro interior comprendido entre 3,0 y 4,0 mm.

Nota: No existe ninguna garantía de que los instrumentos seleccionados solamente con base en estas dimensiones de instrumentos sean compatibles cuando se usen combinados.

Dichiarazione di uso previsto

Lo stiletto di un solo uso GlideRite® è uno strumento di intubazione previsto para su uso por parte de profesionales médicos cualificados con el fin de guiar un tubo endotraqueal hasta la tráquea a través de las cuerdas vocales y cuya forma está diseñada para utilizarse con videolaringoscopios GlideScope®.

Dichiarazione di prescrizione

Precaución: Las leyes federales de los Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

⚠️ ADVERTENCIAS
<ul style="list-style-type: none">Inspeccione el instrumento antes de usarlo y no lo utilice si el producto o el embalaje están dañados. No permita que el estilete sobresalga del extremo distal del tubo ET. No permita que el estilete llegue hasta la glotis o pase a través de las cuerdas vocales. Se trata de un dispositivo de un solo uso, de modo que no lo reutilice, ni lo vuelva a procesar o esterilizar.

Instrucciones de uso

- Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el estilete.
- Extraiga el estilete del embalaje protector.
- Coloque un tubo ET estándar en el estilete.
- Deslice el estilete por el interior del tubo hasta que el extremo distal del estilete alcance el extremo distal del tubo.
- Deslice el tope hasta la posición correspondiente en el tubo, de modo que el extremo distal del estilete no sobrepase el extremo distal del tubo.



- Coloque el extremo distal del tubo ET por encima de las cuerdas vocales. El estilete no debe pasar a través de ellas.
- Cuando el tubo ET haya alcanzado la apertura glótica, levante el tope con el pulgar y retire el estilete.
- Coloque el tubo ET conforme a la práctica estándar.
- Extraiga el estilete del tubo ET.
- Examine el estilete para detectar posibles daños y desecho.

Rangos de almacenamiento

Temperatura –20–45 °C (–4–113 °F) Humedad 10-95 % Presión atmosférica 595-1060 kPa

Definiciones de los símbolos

Para un glosario completo de símbolos usados por Verathon, visite verathon.com/symbols.

Residentes de California — Para obtener información sobre la proposición 65, visite Verathon.com/Prop65

Productbeschrijving

Het GlideRite®-wegveerestiet is ontworpen om de plaatsing van endotracheale tubes (ook wel bekend als *ETT*- of *ET-tube*) mogelijk te maken. Door de rigiditeit van dit stilet kan de gebruiker de tube naar wens manipuleren voor intubatie. Het stilet is bestemd voor gebruik in ET-tubes met een binnendiameter tussen 3,0 en 4,0 mm.

Opmerking: Het wordt niet gegarandeerd dat geselecteerde instrumenten met alleen deze instrumentafmetingen compatibel zijn in combinatie met andere instrumenten.

Verklaring over bedoeld gebruik

Het GlideRite®-wegveerestiet is een hulpmiddel voor intubatie, dat is bedoeld voor gebruik door gelvwaliceerde medische professionals bij het geleiden van een endotracheale tube langs de stembanden naar de luchtpijp. Het stilet is gemaakt voor gebruik met GlideScope®-videolaryngoscoopproducten.

Verklaring over voorschriften

Voorzichtig: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

⚠️ WAARSCHUWINGEN
<ul style="list-style-type: none">Inspecteren voor gebruik – niet gebruiken als het product of de verpakking is beschadigd. Laat het stilet niet verder dan het distale uiteinde van de ET-tube uitsteken. Beveeg het stilet niet in de glottis of voorbij de stembanden. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren.

Gebruiksaanwijzing

- Lees alle instructies vóór gebruik van het stilet.
- Verwijder het stilet uit de beschermende verpakking.
- Plaats een standaard ET-tube op het stilet.
- Schuif het stilet in de tube totdat het distale uiteinde van het stilet zich niet binnen het distale uiteinde van de tube bevindt.
- Schuif de aanslag op zijn plaats in de tube, zodat het distale uiteinde van het stilet niet voorbij het distale uiteinde van de tube kan bewegen.



- Plaats het distale uiteinde van de ET-tube zichtbaar boven de stembanden. Breng het stilet niet voorbij de stembanden.
- Wanneer de ET-tube in de opening van de glottis is geplaatst, gebruik u uw duim om de aanslag los te maken en het stilet terug te trekken.
- Plaats de ET-tube overeenkomstig de standaardpraktijk.
- Verwijder het stilet uit de ET-tube.
- Controleer het stilet op beschadiging en voer het stilet vervolgens af.

Opslagbereiken

Temperatuur –20–45 °C (–4–113 °F) Vochtigheid 10–95 % Atmosferische druk 595–1060 kPa

Betekenis van symbolen

Ga naar verathon.com/symbols voor een volledige lijst met symbolen die door Verathon worden gebruikt.

Inwoners van Californië — Ga voor informatie over Proposition 65 naar: Verathon.com/Prop65

Descrição do produto

O estilete descartável GlideRite® foi projetado para auxiliar na colocação de um tubo endotraqueal (também conhecido como tubo *ETT* ou *ET*). A rigidez deste estilete ajuda o usuário a manipular o tubo conforme desejado para intubação. O estilete destina-se a uso em tubos ET entre 3,0 e 4,0 mm de diâmetro interno.

Observação: Não há garantia de que os instrumentos selecionados usando apenas essas dimensões do instrumento serão compatíveis em combinação.

Declaração de utilização

O estilete descartável GlideRite® é uma ferramenta de auxílio à intubação destinada a uso por profissionais de saúde qualificados que tem por objetivo orientar o tubo endotraqueal, passando pelas cordas vocais até o interior da traqueia e projetada de forma a trabalhar juntamente com produtos de videolaringoscopia GlideScope®.

Declaração de prescrição

Cuidado: A legislação federal norte-americana limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem destes.

⚠️ ADVERTÊNCIAS
<ul style="list-style-type: none">Inspeccionar antes do uso - não usar se o produto ou embalagem estiverem danificados. Não permitir que o estilete se projete além da ponta distal do tubo ET. Não permitir que o estilete avance para o interior da glote ou passe pelas cordas vocais. Apenas para uso descartável. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar.

Instruções de uso

- Ler todas as instruções antes de usar o estilete.
- Remover o estilete de sua embalagem de proteção.
- Colocar um tubo ET padrão no estilete.
- Deslizar o estilete para o interior do tubo até que a ponta distal do estilete fique dentro da ponta distal do tubo.
- Deslizar o batedor para a posição no tubo de modo que a ponta distal do estilete não passe da ponta distal do tubo.



- Posicionar a ponta distal do tubo ET visualmente acima das cordas vocais. Não deixar o estilete ultrapassar as cordas vocais.
- Quando o tubo ET estiver na abertura glótica, usar o polegar para desengatar o batedor e retirar o estilete.
- Posicionar o tubo ET de acordo com a prática padrão.
- Retirar o estilete do tubo ET.
- Verificar se há algum dano no estilete e, em seguida, descartá-lo.

Faixas de armazenamento

Temperatura –20 à 45 °C (–4 à 113 °F) Umidade 10 a 95 % Pressão Atmosférica 595 a 1060 kPa

Definições dos símbolos

Para ver um glossário completo dos símbolos usados pela Verathon, acesse verathon.com/symbols.

Moradores da Califórnia — Para obter informações sobre a Proposta 65, acesse: Verathon.com/Prop65

Produktbeskrivning

GlideRite® mandring för engångsbruk har utformats för att hjälpa till vid placering av en endotrakealtub (även kallad *ETT* eller *ET-tub*). Mandringens styvhet hjälper användaren att styra tuben så att intubering kan genomföras. Mandringen är avsedd att användas i ET-tuber med 3,0 till 4,0 mm intern diameter.

Observera: Det finns ingen garanti för att instrument som väljs ut enbart med hjälp av dessa instrumentdimensioner är kompatibla i kombination.

Avsedd användning

GlideRite-mandring för engångsbruk är ett intuberingsinstrument som ska användas av kvalificerad medicinsk personal för att styra en endotrakealtub förbi stämbånden in i trachea. Den är utformad för att passa till GlideScope®-videolaryngoskopprodukter.


Meddelande om ordination

Försiktighet: Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av eller på order av läkare.

⚠️ VARNINGAR
<ul style="list-style-type: none">Kontrollera före användning. För ej användas om produkten eller förpackningen är skadad. Se till att mandringen inte sticker ut utanför ET-tubens distala ände. Se till att mandringen inte förs in i glottis eller förbi stämbånden. Endast för engångsbruk. För ej återvändas, rengöras eller omsterilieras.

Bruksanvisning

- Läs alla anvisningar innan du använder mandringen.
- Ta ut mandringen ur skyddsförpackningen.
- Placera en standardendotrakealtub på mandringen.
- För in mandringen i tuben tills mandringens distala ände befinner sig precis innanför tubens distala ände.
- Skjut proppen på plats i tuben så att mandringens distala ände inte kan passera tubens distala ände.

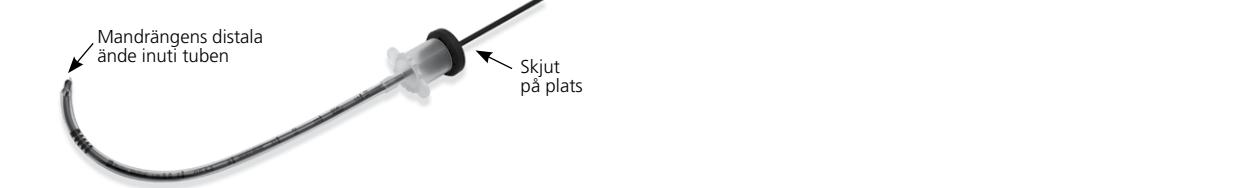

- Placera ET-tubens distala ände så att du ser att den befinner sig ovanför stämbånden. För inte fram mandringen förbi stämbånden.
- När ET-tuben sitter i den glottiska öppningen, använd tummen för att lossa proppen och dra ut mandringen.
- Positionera ET-tuben i erlighet med standardförfarande.
- Avlägsna mandringen från ET-tuben.
- Undersök mandringen avseende skador och kassera den sedan.

Förvaring

Temperatur –20–45 °C (–4–113 °F) Luftfuktighet 10–95 % Lufttryck 595–1060 kPa

Symbolförklaring

Beök verathon.com/symbols för en fullständig ordlista över de symboler som Verathon använder.

Boende i Kalifornien — För information om Proposition 65 (förslag 65), gå till: Verathon.com/Prop65

Produktbeskrivelse

GlideRite®-mandringen for engångsbruk ble utformet for å bidra til å muliggjøre plassering av en endotrakealtube (også kjent som en *ETT*- eller *ET-tube*). Stivheten av denne mandringen hjelper brukeren med å manipulere tuben som ønsket for intubasjon. Mandringen kan brukes i ET-slanger med intern diameter på mellom 3,0 og 4,0 mm.

Merke: Det finnes ingen garanti for at instrumenter som kun er valgt med disse instrumentdimensjonene, vil være compatible i kombinasjon.

Erklæring om tiltenkt bruk

GlideRite-mandringen for engangsbruk er et verktøy til intuberingssistans som er tiltenkt bruk av kvalifisert medisinsk personale, til å føre en endotrakealtube forbi stemmebåndene, formet for å fungere sammen med GlideScope®-laryngoskopprodukter for video.

Erklæring om foreskriving

Forsiktig: Amerikansk lovgivning begrenser denne enheten til salg av, eller på forordning fra, en lege.

⚠️ ADVARSLER
<ul style="list-style-type: none">Undersøk før bruk – ikke bruk produktet eller emballasjen er ødelagt. Ikke la mandringen stikke frem forbi den distale enden av ET-slangen. Ikke for mandringen inte förs in i glottis eller forbi stämbåndene. Kun til engångsbruk. Skal ikke brukas flere ganger, bearbeides for gjenbruk eller steriliseres.

Bruksanvisning

- Les alle instruksjoner før du bruker mandringen.
- Ta mandringen ut av den beskyttende emballasjen.
- Legg en standard ET-slange på mandringen.
- Før in mandringen inn i slangen til den distale enden av mandringen er rett på innsiden av den distale enden av slangen.
- Før stopperen på plass i slangen slik at den distale enden av mandringen ikke kommer forbi den distale enden av slangen.



- Plasser den distale enden av ET-slangen visuelt over stemmebåndene. Ikke før mandringen frem forbi stemmebåndene.
- Når ET-slangen er aktivert i stemmebåndspningen, bruker du tommelen til å deaktivere stopperen og trekke tilbake mandringen.
- Plasser ET-slangen i henhold til standard praksis.
- Fjern mandringen fra ET-tuben.
- Undersøk om mandringen er skade og kast den deretter.

Oppbevaringsforhold

Temperatur –20–45 °C (–4–113 °F) Luftfuktighet 10–95 % Atmosfærisk trykk 595–1060 kPa

Symbolforklaringer

Før fullstendig ordliste med symboler som brukes av Verathon, kan du gå inn på verathon.com/symbols.

Innbyggere i California - for informasjon om loven Proposition 65, går du inn på: Verathon.com/Prop65

Säilytysolosuhteet

Lämpötilä –20–45 °C (–4–113 °F) Ilmankosteus 10–95 % Ilmanpaine 595–1060 kPa

Symbolien määrittelyt

Katso työllinen sanasto Verathonin käyttämästä symboleista osoitteesta verathon.com/symbols.

Kalifornian asukkaat - tietoa lain 65 (Prop 65) vaatimusten täyttämistästä on osoitteessa Verathon.com/Prop65

