



Technik mit hyperanguliertem Spatel




- 1** Führen Sie den Spatel mittig ein und schieben Sie die Spitze vor, bis sie sich hinter der Zungenrückseite befindet.

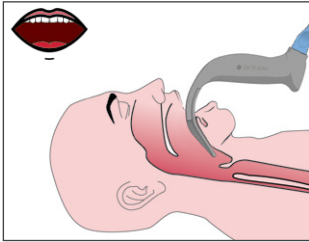


- 3** Verwenden Sie einen GlideRite-Mandrin (optional) und führen Sie den ET-Tubus entlang der rechten Seite des Spatels ein.

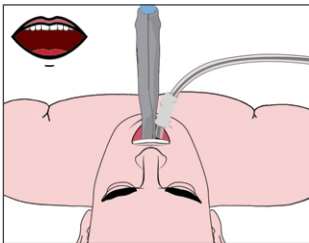


- 5** Um den GlideRite-Mandrin zu entfernen, ziehen Sie ihn in Richtung der Füße des Patienten heraus.

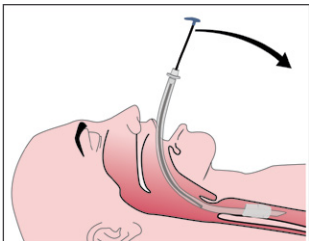


- 2** Identifizieren Sie die Epiglottis und schieben Sie dann den Spatel für einen Blick auf die Glottis in die Vallecula vor.

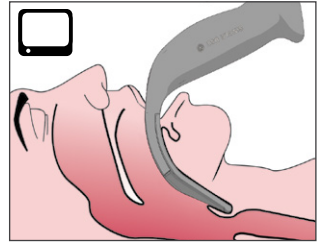

- 4** Vollenden Sie die Intubation.

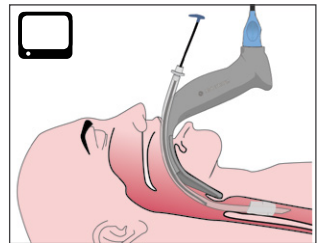

 – Während des Arbeitsschritts in den Mund schauen.


 – Während des Arbeitsschritts auf den Monitor schauen.

 *Wichtig: Dieses Dokument ist lediglich eine Kurzanleitung. Eine vollständige Anleitung finden Sie in Ihrem Bedienungs- und Wartungshandbuch unter verathon.com/service-and-support.*

 Verathon Medical (Kanada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9, Canada
Tel.: +1 604 439 3009
Fax: +1 604 439 3039

 Verathon Medical (Europa) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam, Niederlande
 Tel.: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, USA
Tel.: +1 800 331 2313 (nur USA und Kanada)
Tel.: +1 425 867 1348 Fax: +1 425 883 2896

 Anandic Medical Systems AG
Stadtweg 24
8245 Feuerthalen
Schweiz

 MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Schweiz

Verathon Medical (Australien) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australien
Tel.: 1800 613 603 / Fax: 1800 657 970
(innerhalb von Australien)
Tel.: +61 2 9431 2000 /
Fax: +61 2 9475 1201 (international)

verathon

GlideRite, Verathon und die jeweiligen Symbole sind Marken von Verathon Inc.
Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
© 2023 Verathon Inc.



0900-4511-DEDE REV-02