



Técnica con palas hiperanguladas




- 1** Inserte la línea media de la pala y haga avanzar la punta hasta que pase la cara posterior de la lengua.

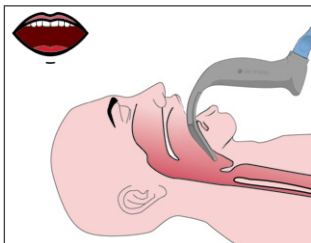


- 2** Identifique la epiglotis y haga avanzar la pala hacia la vallécula para poder ver la glotis.

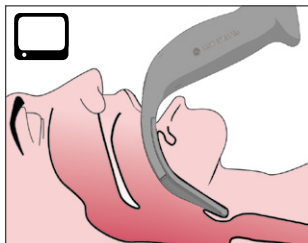


- 3** Use un estilete GlideRite (opcional) para introducir el tubo ET desde la parte derecha de la pala.

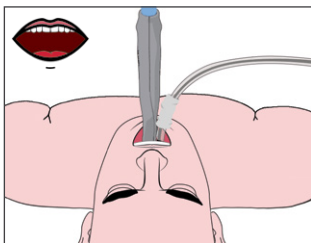

- 4** Complete la intubación.

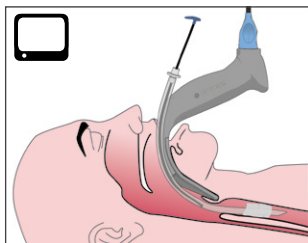

- 5** Para retirar el estilete GlideRite, tire de él en dirección hacia los pies del paciente.

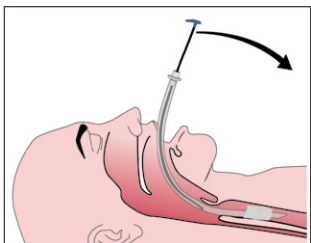

 — *Mire a la boca durante el paso.*

 — *Mire al monitor durante el paso.*



Importante: Este documento sirve solo como referencia rápida. Para obtener las instrucciones completas, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento en verathon.com/service-and-support.



Verathon Medical (Canadá) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9, Canadá
Tel.: +1 604 439 3009
Fax: +1 604 439 3039



Verathon Medical (Europa) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam, Países Bajos
Tel.: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92



UE

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, EE. UU.
Tel.: +1 800 331 2313 (solo EE. UU. y Canadá)
Tel.: +1 425 867 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896



CH

Anandic Medical Systems AG
Stadtweg 24
8245 Feuerthalen
Suiza



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Suiza

Verathon Medical (Australia) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australia
Tel.: 1800 613 603 / Fax: 1800 657 970 (en Australia)
Tel.: +61 2 9431 2000 / Fax: +61 2 9475 1201 (internacional)

verathon

GlideRite, Verathon y sus símbolos respectivos son marcas comerciales de Verathon Inc. El resto de las marcas y de los nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

© 2023 Verathon Inc.



0900-4511-ESES REV-02