



# Technique pour lame courbe




- 1** Insérez la lame le long de la ligne médiane de la langue, en faisant avancer la pointe jusqu'à ce qu'elle soit au-delà de la face postérieure de la langue.

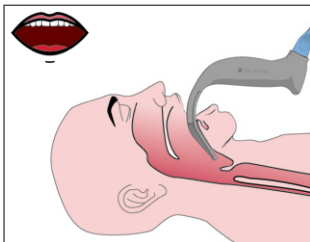


- 2** Identifiez l'épiglotte et avancez la lame dans la vallécule pour avoir une vue de la glotte.

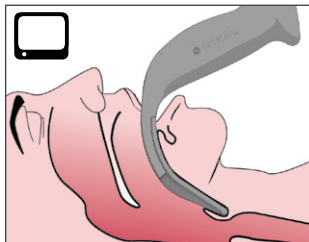


- 3** À l'aide d'un stylet GlideRite (facultatif), introduisez la sonde endotrachéale le long du côté droit de la lame.

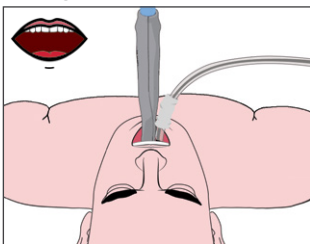

- 4** Terminez l'intubation.

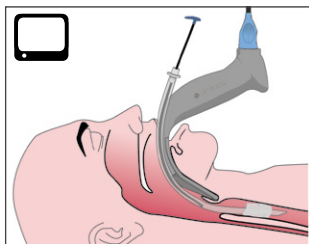

- 5** Pour retirer le stylet GlideRite, tirez-le vers les pieds du patient.

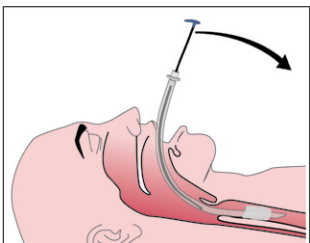

 — Regardez dans la bouche pendant cette étape.

 — Regardez le moniteur pendant cette étape.



*Important : Ce document est destiné à servir de référence rapide uniquement. Pour les instructions complètes, consultez votre Manuel d'utilisation et de maintenance sur [verathon.com/service-and-support](http://verathon.com/service-and-support).*



Verathon Medical (Canada) ULC  
2227 Douglas Road  
Burnaby, BC V5C 5A9, Canada  
Tél. : +1 604 439 3009  
Fax : +1 604 439 3039



Verathon Medical (Europe) B.V.  
Willem Fenengastraat 13  
1096 BL Amsterdam, Pays-Bas  
Tél. : +31 (0) 20 210 30 91  
Fax : +31 (0) 20 210 30 92



Verathon Inc.  
20001 North Creek Parkway  
Bothell, WA 98011, États-Unis  
Tél. : +1 800 331 2313 (États-Unis et Canada uniquement)  
Tél. : +1 425 867 1348 Fax : +1 425 883 2896



Anandic Medical Systems AG  
Stadtweg 24  
8245 Feuerthalen  
Suisse



MDSS CH GmbH  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau  
Suisse

Verathon Medical (Australie) Pty Limited  
Unit 9, 39 Herbert Street  
St Leonards NSW 2065  
Australie  
Tél. : 1800 613 603 / Fax : 1800 657 970 (depuis l'Australie)  
Tél. : +61 2 9431 2000 / Fax : +61 2 9475 1201 (international)

# verathon

GlideRite, Verathon et les symboles correspondants sont des marques commerciales de Verathon Inc.  
L'ensemble des autres marques et noms de produits sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

© 2023 Verathon Inc.



0900-4511-FRCA REV-02