



# Tecnica per una lama iperangolata




- 1** Inserire la linea mediana della lama facendo avanzare la punta fino a superare la porzione posteriore della lingua.

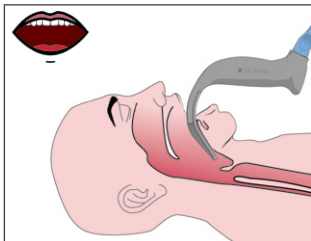


- 2** Identificare l'epiglottide e far avanzare la lama nella vallecchia per visualizzare la glottide.

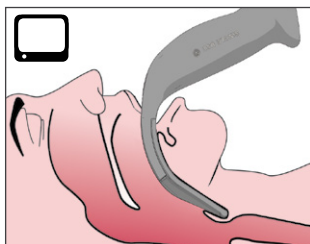


- 3** Servendosi di un mandrino GlideRite (facoltativo), introdurre il tubo ET lungo il lato destro della lama.

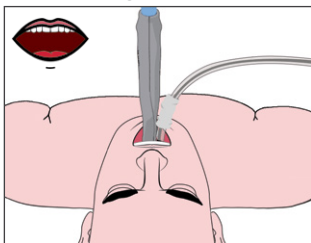

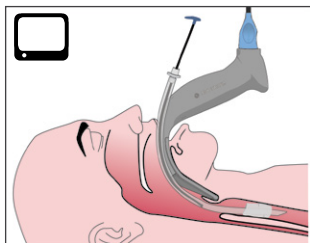

- 4** Completare la procedura di intubazione.

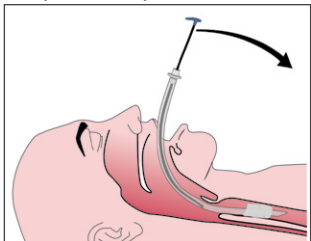

- 5** Per rimuovere il mandrino GlideRite, estrarlo in direzione del piede del paziente.



 - Durante la procedura guardare nella bocca.

 - Durante la procedura guardare il monitor.



*Importante: il presente documento offre solo un riferimento rapido. Per ottenere le istruzioni necessarie, consultare il Manuale di funzionamento e manutenzione al sito [verathon.com/service-and-support](http://verathon.com/service-and-support).*



Verathon Medical (Canada) ULC  
2227 Douglas Road  
Burnaby, BC V5C 5A9, Canada  
Tel: +1 604 439 3009  
Fax: +1 604 439 3039



Verathon Medical (Europa) B.V.  
Willem Fenengstraat 13  
1096 BL Amsterdam, Paesi Bassi  
Tel: +31 (0) 20 210 30 91  
Fax: +31 (0) 20 210 30 92



Verathon Inc.  
20001 North Creek Parkway  
Bothell, WA 98011, Stati Uniti  
Tel: +1 800 331 2313 (solo USA e Canada)  
Tel: +1 425 867 1348 Fax: +1 425 883 2896



Anandic Medical Systems AG  
Stadtweg 24  
8245 Feuerthalen  
Svizzera



MDSS CH GmbH  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau  
Svizzera

Verathon Medical (Australia) Pty Limited  
Unit 9, 39 Herbert Street  
St Leonards NSW 2065  
Australia  
Tel.: 1800 613 603 / Fax: 1800 657 970  
(all'interno dell'Australia)  
Tel.: +61 2 9431 2000 / Fax: +61 2 9475 1201  
(internazionale)

# verathon

GlideRite, Verathon e i rispettivi simboli sono marchi registrati di Verathon Inc.  
Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.  
© 2023 Verathon Inc.



0900-4511-ITIT REV-02