



GlideScope® en GlideRite®
Compatibele herverwerkingsproducten

GlideScope®
verathon

GlideScope® en GlideRite®

Compatibele Herverwerkingsproducten

Ingangsdatum: 4 augustus 2025

Let op: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

Contactgegevens

Neem voor aanvullende informatie over uw GlideScope-systeem contact op met Verathon Customer Care of ga naar verathon.com/service-and-support.

Verathon Inc.

20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011 VS
Tel.: +1 800 331 2313 (uitsluitend VS en Canada)
Tel: +1 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896
verathon.com



Verathon Medical (Canada) ULC

2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9
Canada
Tel: +1 604 439 3009
Fax: +1 604 439 3039



Verathon Medical (Europa) B.V.

Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Australië) Pty Limited

Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australië



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Zwitserland

Binnen Australië: 1800 613 603 Tel / 1800 657 970 Fax
Internationaal: +61 2 9431 2000 Tel /
+61 2 9475 1201 Fax



Anandic Medical Systems AG

Stadtweg 24
8245 Feuerthalen
Zwitserland



Copyright © 2025 Verathon Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verathon Inc. worden gekopieerd of op enigerlei wijze worden overgedragen.

GlideScope, GlideScope Core, GlideScope Go, Spectrum, AVL, BFlex, GlideRite, Verathon en de bijbehorende symbolen zijn handelsmerken van Verathon Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.

Niet alle producten van Verathon Inc. die in dit document worden getoond of beschreven zijn te koop in alle landen.

De informatie in dit document kan op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de documentatie op verathon.com/service-and-support voor de meest actuele informatie.

Inhoudsopgave

BELANGRIJKE INFORMATIE	1
Inleidende informatie	1
Producten die in dit document worden behandeld	2
COMPATIBILITEIT- EN WERKZAAMHEIDSTABELLEN	8
AVL-videobatons	9
Videobaton 2.0	11
Videobaton QC	12
ClearFit-videobaton	13
Videolaryngoscopen en stiletten	14
GlideScope Core-monitoren, -werkstations en -voedingsadapter	17
GlideScope Go 2-monitor en laadstation	20
GlideScope Go-monitor en laadstation	21
GlideScope-videomonitor, mobiele standaard, premium onderstel en voedingsadapter	22
Kabellen voor GlideScope Core-monitoren	24
Kabellen voor de GlideScope-videomonitor	26
WOORDENLIJST	29

Belangrijke informatie

Inleidende informatie

Reiniging en desinfectie vormen een belangrijk onderdeel van het gebruik en het onderhoud van herbruikbare componenten. Zorg er voorafgaand aan elk gebruik voor dat zulke componenten zijn gereinigd en gedesinfecteerd of gesteriliseerd (indien nodig) volgens de richtlijnen in de *handleiding voor herverwerking van GlideScope- en GlideRite-producten*. U moet het GlideScope-systeem ook regelmatig onderzoeken om er zeker van te zijn dat het correct werkt. Raadpleeg de betreffende bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie.

Raadpleeg de pagina over desinfectie en sterilisatie van de Centers for Disease Control and Prevention in de Verenigde Staten (<http://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html>) voor definities en aanvullende informatie over normen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie.

De beschikbaarheid van de reinigings-, desinfectie- en sterilisatieproducten in dit document en de mate waarin deze aan normen en voorschriften voldoen, verschillen per regio. Zorg ervoor dat u producten kiest conform de plaatselijke wetten en voorschriften.

Producten die in dit document worden behandeld

Dit document bevat een lijst met reinigings-, desinfectie- en sterilisatiemiddelen voor een breed scala aan GlideScope- en GlideRite-producten. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen ter verduidelijking om u te helpen bij het identificeren van de componenten die u aan het herverwerken bent.

AVL-videobaton



AVL-videobaton 1-2
(pagina 9)



AVL-videobaton 3-4
(pagina 9)

Videobaton 2.0



Videobaton 2.0 groot
(3-4; pagina 11)

Videobaton QC

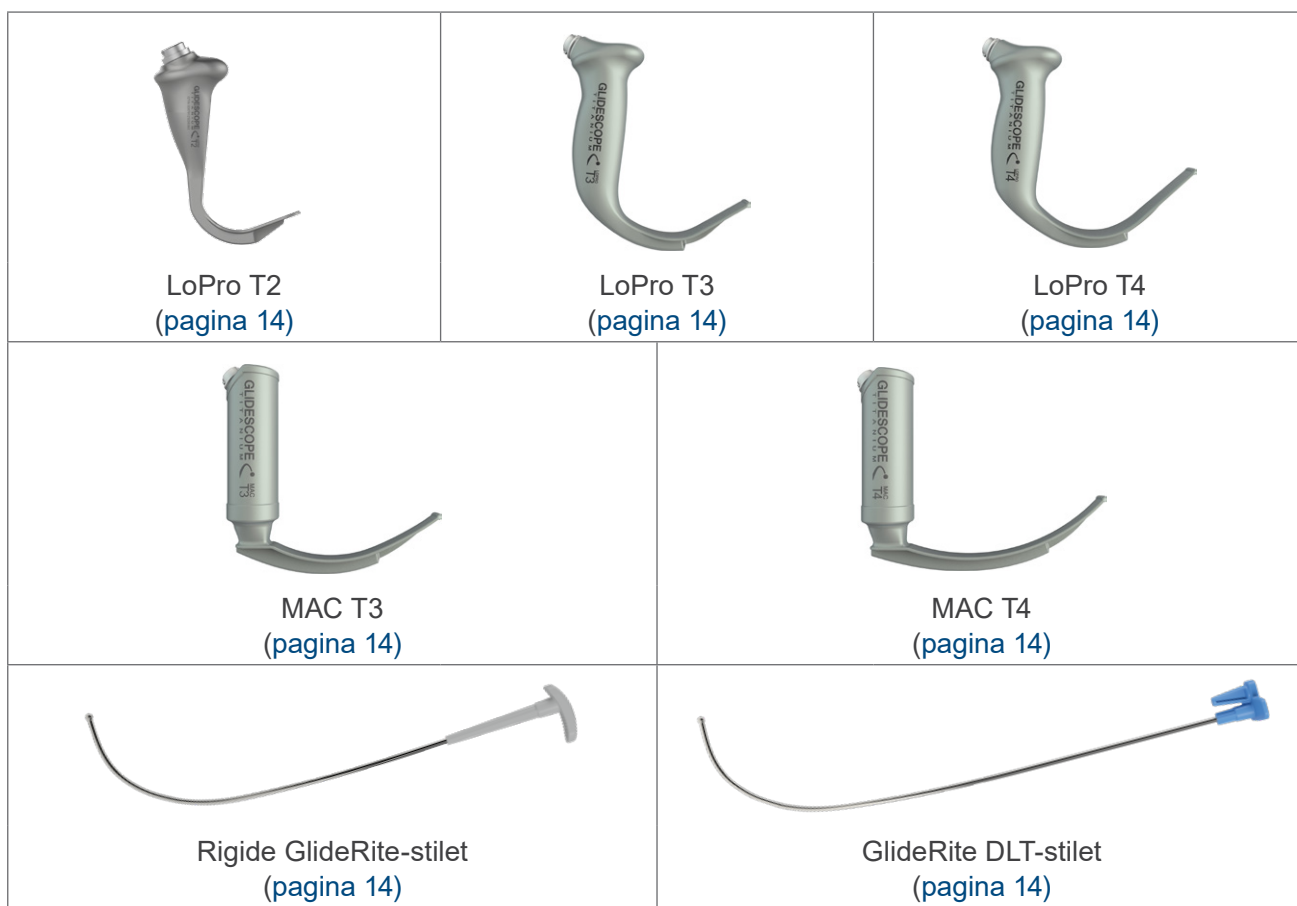


Videobaton QC groot
(pagina 12)

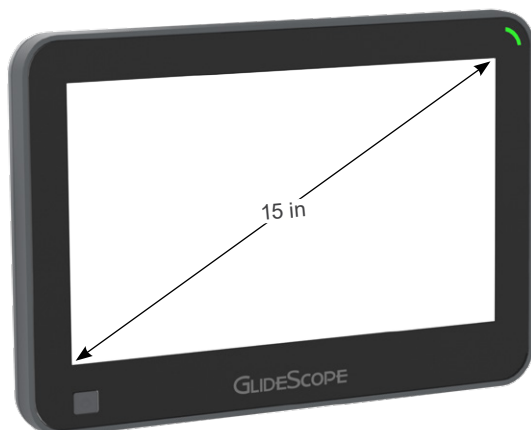
ClearFit-videobaton



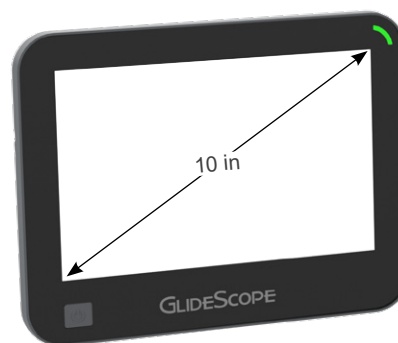
Videolaryngoscopen en stiletten



GlideScope Core-monitoren, -werkstation en -voedingsadapter



GlideScope Core 15- en Core 15 FHD-monitoren
(pagina 17)



GlideScope Core 10- en Core 10 FHD-monitoren
(pagina 17)



GlideScope Core Premium-werkstation
(pagina 17)



GlideScope Core-voedingsadapter (pagina 17)

GlideScope Go 2-monitor en laadstation



GlideScope Go 2-monitor
(pagina 20)



GlideScope Go 2-laadstation
(pagina 20)

GlideScope Go-monitor en laadstation



GlideScope Go-monitor
(pagina 21)



GlideScope Go-laadstation
(pagina 21)

GlideScope-videomonitor, mobiele standaard, premium onderstel en voedingsadapter



GlideScope-videomonitor
(pagina 22)



Voedingsadapter van de GlideScope-videomonitor
(pagina 22)

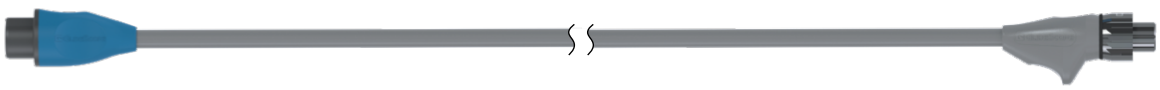
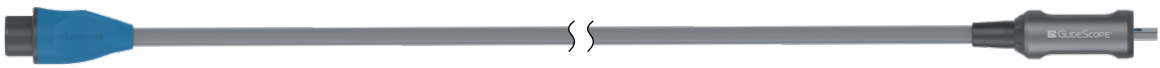
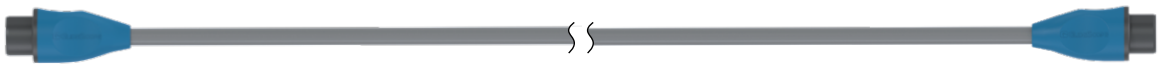


Premium onderstel van de
GlideScope-videomonitor
(pagina 22)



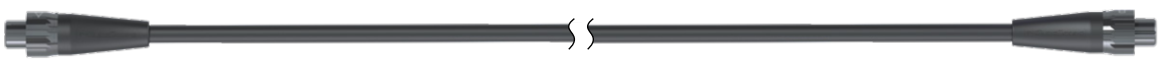
Mobiele standaard van de
GlideScope-videomonitor
(pagina 22)

Kabels voor GlideScope Core-monitoren


GlideScope Core-videokabel (pagina 24)

GlideScope Core Smart Cable (pagina 24)

GlideScope Core QuickConnect-kabel, 2m GlideScope Core QuickConnect-kabel (pagina 24)

Opmerking: Deze afbeeldingen zijn ingekort voor illustratieve doeleinden.

Kabels voor de GlideScope-videomonitor


Titanium-videokabel (pagina 26)

Spectrum Smart Cable (pagina 26)

QuickConnect-kabel van de GlideScope-videomonitor (pagina 26)

Compatibiliteit- en werkzaamheidstabellen

BELANGRIJK

Als de volgende tabellen een product vermelden als werkzaam voor de GlideScope- of GlideRite-component die u reinigt, desinfecteert of steriliseert, raadpleeg dan de *handleiding voor herverwerking van de GlideScope- en GlideRite-producten* voor specifieke instructies. Concentraties, temperaturen, tijden en specifieke aanwijzingen in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op tests die door Verathon zijn uitgevoerd en kunnen afwijken van de instructies van de fabrikant voor sommige herverwerkingsproducten.

De tabellen in dit document bevatten de reinigings-, desinfectie- en sterilisatieproducten die Verathon op zijn systeemcomponenten heeft getest om de compatibiliteit, werkzaamheid of beide te evalueren. De onderstaande tabel toont de betekenis van de indicatoren voor compatibiliteit en werkzaamheid in de tabellen.

INDICATOR	BETEKENIS
●	Dit product is zowel werkzaam als compatibel met deze component.
○	Dit product is compatibel met deze component, maar Verathon heeft de werkzaamheid ervan niet vastgesteld. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over de werkzaamheid.
(nummer)	Dit product is compatibel met deze component tot het aantal gebruikscycli dat tussen haakjes is aangegeven. Als een product als compatibel wordt vermeld, maar niet is voorzien van dit nummer, is het compatibel tot het standaard aantal gebruikscycli dat bovenaan de tabel wordt weergegeven.

De onderstaande afbeelding toont hoe de indicatoren en andere informatie in de tabellen zijn gerangschikt.

PRODUCT		DISINFECTION LEVEL	Componenten Verathon-systeem		
			TITANIUM BLADE (LOPRO T2)	TITANIUM BLADE (ALL OTHERS)	GLIDERITE REUSABLE STYLET
Default Compatibility (Cycles)			3000	3000	3000
Metrex CaviWipes1		Cleaning / Low		○	○
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes		Cleaning / Low	○	○	○
schülke gigasept PAA concentrate		Low			○
ASP CIDEX Activated Dialdehyde Solution (ADS)		High	● (1000)	● (1000)	

Herverwerkingsproducten

Desinfectieniveau van elk product (voorreiniging, reiniging, laag, middel, hoog of sterilisatie)

Typisch aantal gebruikscycli voor elke component

Indicatoren voor compatibiliteit en werkzaamheid

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

AVL-videobatons

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	AVL-VIDEO-BATON 1-2	AVL-VIDEO-BATON 3-4
Standaard compatibiliteit (cycli)		2000	2000
STERIS PRE-Klenz Instrument Transport Gel (transportgel voor instrumenten)	Voorreiniging		○
Anios Aniosyme XL3 enzymatisch reinigingsmiddel	Reiniging		○
Dr. Weigert neodisher MediClean forte	Reiniging		○
Ecolab enzymatisch reinigingsmiddel	Reiniging		○
Ecolab Incidin-systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging		○
Ecolab MetalClean Plus	Reiniging		○
Isopropylalcohol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging		○
schülke thermosept ER-reinigingsmiddel	Reiniging		○
STERIS Prolystica 2x geconcentreerd enzymatisch week- en reinigingsmiddel	Reiniging	●	●
B. Braun Meliseptol HBV Tissues (doekjes)	Reiniging/laag		○
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	○	○
Dr. Schumacher DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (doekjes)	Reiniging/laag		○
Metrex CaviWipes1	Reiniging/laag	○	○
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag		●
PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes met bleek)	Reiniging/laag	○	○
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag		○
Diversey Accel INTERVention Wipes (doekjes)	Laag	○ (1100)	○ (1100)
Diversey Oxivir TB-doekjes	Laag	○ (1100)	○ (1100)
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoog		○
ASP CIDEX OPA-desinfectiemiddel	Hoog		○
ASP CIDEX PLUS	Hoog		○
Cantel (MEDIVATORS) Advantage Plus-herverwerkingssysteem voor endoscopen (met behulp van Cantel Rapicide PA 30 °C)	Hoog		● (100)
Metrex MetriCide Plus 30	Hoog		○
Sultan Healthcare Sporox II	Hoog		○ (500)

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIE- NIVEAU	AVL-VIDEO- BATON 1-2	AVL-VIDEO- BATON 3-4
Standaard compatibiliteit (cycli)		2000	2000
Anios Anioxyde 1000-desinfectiemiddel van hoog niveau en koud sterilisatiemiddel	Hoog/ sterilisatie	○ (1200)	○
STERIS V-PRO-systemen voor sterilisatie bij lage temperatuur (V-PRO 1, V-PRO 1 Plus, V-PRO maX, V-PRO 60; gebruiken allemaal STERIS VAPROX HC)	Sterilisatie		○ (200)
STERRAD 50 STERRAD 200S (korte en standaardcycli) STERRAD 100S (korte cycli voor VS en andere regio's) STERRAD NX (standaardcyclus) STERRAD 100 NX (standaardcyclus) Allen maken gebruik van waterstofperoxidegasplasma	Sterilisatie		○ (100)

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

Videobaton 2.0

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	VIDEO-BATON 2.0 GROOT (3-4)
Standaard compatibiliteit (cycli)		2000
ASP CIDEZYME/ENZOL Enzymatic Detergent (enzymatisch reinigingsmiddel)	Reiniging	○
Dr. Weigert neodisher MediClean forte	Reiniging	○
Ecolab enzymatisch reinigingsmiddel	Reiniging	○
Ecolab Incidin-systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○
HARTMANN Bacillol 30-tissues	Reiniging	○
Isopropylalcohol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○
Metrex EmPower	Reiniging	○
schülke perform (poederconcentraat)	Reiniging	○
schülke thermosept ER-reinigingsmiddel	Reiniging	○
STERIS Prolystica 2x geconcentreerd enzymatisch week- en reinigingsmiddel	Reiniging	●
B. Braun Meliseptol HBV Tissues (doekjes)	Reiniging/laag	○
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	○
Dr. Schumacher DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (doekjes)	Reiniging/laag	○
Metrex CaviWipes1	Reiniging/laag	○
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	●
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	○
Vernacare TUFFIE 5 universele ontsmettingsdoekjes	Reiniging/laag	○
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoog	○
ASP CIDEX OPA-desinfectiemiddel	Hoog	○
ASP CIDEX PLUS	Hoog	○ (500)
Metrex MetriCide Plus 30	Hoog	○ (500)
Sultan Healthcare Sporox II	Hoog	○ (500)
Anios Anioxyde 1000-desinfectiemiddel van hoog niveau en koud sterilisatiemiddel	Hoog/ sterilisatie	○
STERIS V-PRO-systemen voor sterilisatie bij lage temperatuur (V-PRO 1, V-PRO 1 Plus, V-PRO maX, V-PRO 60; gebruiken allemaal STERIS VAPROX HC)	Sterilisatie	○ (200)
STERRAD 50 STERRAD 200S (korte en standaardcycli) STERRAD 100S (korte cycli voor VS en andere regio's) STERRAD NX (standaardcyclus) STERRAD 100 NX (standaardcyclus) Allen maken gebruik van waterstofperoxidegasplasma	Sterilisatie	○ (100)

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

Videobaton QC

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	VIDEO-BATON QC GROOT
Standaard compatibiliteit (cycli)		2000
ASP CIDEZYME/ENZOL Enzymatic Detergent (enzymatisch reinigingsmiddel)	Reiniging	○
PDI Sani-Cloth Plus Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging	○
STERIS Prolystica 2x geconcentreerd enzymatisch week- en reinigingsmiddel	Reiniging	●
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	○
Metrex CaviWipes	Reiniging/laag	○
Metrex CaviWipes1	Reiniging/laag	○
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	●
PDI Sani-Cloth Prime Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	○
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	○
Vernacare TUFFIE 5 universele ontsmettingsdoekjes	Reiniging/laag	○
WIP'ANIOS EXCEL	Reiniging/laag	○
schülke schülke mikrozid sensitive wipes (doekjes)	Laag	○
Tristel Trio Wipes-systeem	Reiniging/hoog	○
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoog	○
ASP CIDEX OPA-desinfectiemiddel	Hoog	○

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

ClearFit-videobaton

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	CLEARFIT-VIDEO-BATON
Standaard compatibiliteit (cycli)		2000
STERIS Prolystica 2x geconcentreerd enzymatisch week- en reinigingsmiddel	Reiniging	●
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging	●

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

Videolaryngoscopen en stiletten

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	TITANIUM BLAD	HERBRUIK-BAAR GLIDERITE-STILET
Standaard compatibiliteit (cycli)		3000	3000
Covidien FRED Anti-Fog Solution (anti-condensoplossing)	Anti-condensmiddel	○ (100)	
Covidien FRED Lite Anti-Fog Solution (anti-condensoplossing)	Anti-condensmiddel	○ (100)	
BeliMed Protect Enzymatic Pretreatment Foam Spray (enzymatische schuimspray voor de voorbehandeling)	Voorreiniging	○	○
Ecolab OptiPro-gel voor vooraf reinigen van instrumenten	Voorreiniging	○	○
STERIS PRE-Klenz Instrument Transport Gel (transportgel voor instrumenten)	Voorreiniging	○	○
Anios Aniosyme XL3 enzymatisch reinigingsmiddel	Reiniging	○	○
Certol ProEZ enzymatische schuimspray	Reiniging	○ (500)	○ (500)
Dr. Weigert neodisher MediClean forte	Reiniging	○	○
Ecolab enzymatisch reinigingsmiddel	Reiniging	●	○
Ecolab Incidin-systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○ (1500)
Ecolab MetalClean Plus	Reiniging	○	○
Ecolab OptiPro multi-enzymatisch laagschuimend reinigingsmiddel	Reiniging	●	●
Ecolab Sekusept Multienzyme (multi-enzym)	Reiniging	○	
Geringe Renuzyme-schuimspray	Reiniging	○	○
Geringe Tec Wash III	Reiniging	●	● (1500)
HARTMANN Bodedex forte	Reiniging	○	
Isopropylalcohol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○ (1500)
Metrex CaviCide	Reiniging	●	● (1500)
Metrex EmPower	Reiniging	●	● (1500)
Pro-Line Solutions EcoZyme	Reiniging	●	● (1500)
Ruhof Endozime AW Plus	Reiniging	○	○
Ruhof Endozime AW Triple Plus met APA	Reiniging	○	○
Ruhof Endozime Bio-Clean	Reiniging	○	○
Ruhof Endozime Premium met APA	Reiniging	○	○

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	TITANIUM BLAD	HERBRUIK-BAAR GLIDERITE-STILET
Standaard compatibiliteit (cycli)		3000	3000
Ruhof Liquidclean AW	Reiniging	○	○
Ruhof Prepzyme	Reiniging	○	○ (1500)
STERIS eSENTIALS Concentrates	Reiniging	●	
schülke gigazyme X-tra	Reiniging		○
schülke thermosept ER-reinigingsmiddel	Reiniging	○	○
Natriumdodecylsulfatoplossing (SDS)	Reiniging	○ (100)	
STERIS Prolystica 2x geconcentreerd enzymatisch week- en reinigingsmiddel	Reiniging	●	●
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	○	○
Ecolab Sekusept PLUS	Reiniging/laag		○
Metrex CaviWipes1	Reiniging/laag	○	○
PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes met bleek)	Reiniging/laag		○
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	○	○
Tristel Trio Wipes-systeem	Reiniging/hog	●	○
ASP CIDEX Activated Dialdehyde Solution (ADS) (geactiveerde dialdehydeoplossing)	Hog	● (1000)	
ASP CIDEX OPA-desinfectiemiddel	Hog	●	●
ASP CIDEX PLUS	Hog	●	○ (200)
Cantel (MEDIVATORS) Advantage Plus-herverwerkingsysteem voor endoscopen met behulp van Rapicide PA 30 °C	Hog	● (100)	● (100)
Cantel (MEDIVATORS) geautomatiseerde herverwerkers voor endoscopen: CER Optima 1 & 2 DSD-201 SSD-102	Hog	● (100)	
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide OPA/28	Hog	●	
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hog	●	●
Gioperacetic desinfectieoplossing	Hog	○	
HARTMANN Korsolex extra	Hog	○	
LANXESS Rely+On PeraSafe	Hog	○	
Metrex MetriCide 28	Hog	●	● (1500)
Metrex MetriCide OPA Plus	Hog	●	●

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	TITANIUM BLAD	HERBRUIK-BAAR GLIDERITE-STILET
Standaard compatibiliteit (cycli)		3000	3000
Metrex MetriCide Plus 30	Hoog	●	○ (200)
schülke gigasept PAA concentrate (concentraat)	Hoog		○
STERIS Resert XL HLD	Hoog	●	● (1500)
STERIS Revital-Ox Resert XL HLD	Hoog	●	● (1500)
STERIS Revital-Ox Resert XL HLD/chemisch steriliserend middel	Hoog	●	● (1500)
Sultan Healthcare Sporox II	Hoog		○ (200)
Thermische desinfectie (reinigings-desinfectiesystemen, gedurende 5 minuten bij 90 °C of gedurende 2,5 minuut bij 93 °C; alleen EU)	Hoog		● (100)
Tristel Duo Foam Wipes (schuimdoekjes)	Hoog	○ (500)	○ (500)
Anios Anioxyde 1000-desinfectiemiddel van hoog niveau en koud sterilisatiemiddel	Hoog/ sterilisatie	○	○
STERIS S40 of S20 in één van de volgende: System 1 E System 1 System 1 Express System 1 Plus	Hoog/ sterilisatie	● (650)	● (500)
Autoclaveren (stoomcyclus, 132-134 °C)	Sterilisatie		● (300)
Autoclaveren (stoomcyclus, 137 °C)	Sterilisatie		○ (300)
Ethyleenoxide (EO)	Sterilisatie	● (100)	● (100)
STERIS V-PRO-systemen voor sterilisatie bij lage temperatuur: V-PRO 1 V-PRO 1 Plus V-PRO maX V-PRO 60 Allen maken gebruik van STERIS VAPROX HC	Sterilisatie	● (125)	● (500)
STERRAD 50 STERRAD 200S (korte en standaardcycli) STERRAD 100S (korte cycli voor VS en andere regio's) STERRAD NX (standaardcyclus) STERRAD 100 NX (standaardcyclus) Allen maken gebruik van waterstofperoxidegasplasma	Sterilisatie	● (300)	● (500)

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

GlideScope Core-monitoren, -werkstations en -voedingsadapter

PRODUCT	DESINFECTIENIVEAU	GLIDESCOPE CORE 15- EN CORE 15 FHD-MONITOREN	GLIDESCOPE CORE 10- EN CORE 10 FHD-MONITOREN	PREMIUM WERKSTATION	VB 2.0 / QC- HOUDERBEUGEL	CLEARFIT- BATONHOUDER -BEUGELCON- STRUCTIE	STANDAARD- KLEMMENSET	VOEDINGSADAPTER ¹	ENDOSCOOP- HOUDER	AVL- BATONHOUDER
Standaard compatibiliteit (cycli)		2000	2000	100	100	2000	1000	100	100	2000
Ecolab Incidin- systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	○	○		○	○		
HARTMANN Bacillol 30-tissues	Reiniging	○ (1000)	○ (1000)	○						
Isopropylalco- hol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	○	○		○	○	○	
Metrex CaviWipes	Reiniging	○	○	○						
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging	○	○	○		○	○			
PDI Sani-Cloth Plus Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging	○	○	○						○

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIENIVEAU	GLIDESCOPE CORE 15- EN CORE 15 FHD-MONITOREN	GLIDESCOPE CORE 10- EN CORE 10 FHD-MONITOREN	PREMIUM WERKSTATION	VB 2.0 / QC- HOUDERBEUGEL	CLEARFIT- BATONHOUDER EN-BEUGELCON- STRUCTIE	STANDAARD- KLEMMENSET	VOEDINGSADAPTER ¹	ENDOSCOOP- HOUDER	AVL- BATONHOUDER
Standaard compatibiliteit (cycli)		2000	2000	100	100	2000	1000	100	100	2000
schülke perform (poedercon- centraat)	Reiniging	○	○	○						
Natriumhypo- chloriet (bleek; 0,16%/ 1600 ppm; toegepast met doekjes)	Reiniging			○	○					
Universele Clinell- doekjes	Reiniging/ laag	○	○	○			○	○		
Diversey Accel Five TB	Reiniging/ laag				○					
Metrex CaviWipes	Reiniging/ laag				○					
Metrex CaviWipes1	Reiniging/ laag	○	○	○			○			
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/ laag			○			○			
PDI Sani-Cloth Prime	Reiniging/ laag	○	○	○						
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/ laag	○	○	○	○		○			

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIENIVEAU	GLIDESCOPE CORE 15- EN CORE 15 FHD-MONITOREN	GLIDESCOPE CORE 10- EN CORE 10 FHD-MONITOREN	PREMIUM WERKSTATION	VB 2.0 / QC- HOUDERBEUGEL	CLEARFIT- BATONHOUDER EN-BEUGELCON- STRUCTIE	STANDAARD- KLEMMENSET	VOEDINGSADAPTER ¹	ENDOSCOOP- HOUDER	AVL- BATONHOUDER
Standaard compatibiliteit (cycli)		2000	2000	100	100	2000	1000	100	100	2000
Vernacare TUFFIE 5 universele ontsmettings- doekjes	Reiniging/ laag	○	○							
Virox Technologies Accel TB- doekjes	Reiniging/ laag			○						
Diversey Accel INTERVention Wipes (doekjes)/ Diversey Oxivir Tb Wipes (doekjes)	Laag	○	○	○	○					
¹ De voedingsadapter voor gereviseerde GlideScope Core-monitoren (0400-0166) is niet getest op compatibiliteit met herverwerking.										

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

GlideScope Go 2-monitor en laadstation

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	GLIDESCOPE GO 2-MONITOR	LAADSTATION	VOEDINGS-ADAPTERS
Standaard compatibiliteit (cycli)		1500	1500	1500
ASP CIDEZYME/ENZOL Enzymatic Detergent (enzymatisch reinigingsmiddel)	Reiniging	●	○ ¹	
Ecolab Incidin-systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	
Isopropylalcohol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging	●	○	
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	○	○	○
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Laag	○	○	
ASP CIDEX OPA-desinfectiemiddel	Hoog	○		
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoog	○		

¹ Alleen te gebruiken met vochtige doekjes.

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

GlideScope Go-monitor en laadstation

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	GLIDESCOPE GO-MONITOR	LAADSTATION
Standaard compatibiliteit (cycli)		1500	1500
ASP CIDEZYME/ENZOL Enzymatic Detergent (enzymatisch reinigingsmiddel)	Reiniging	●	
Ecolab Incidin-systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○
Isopropylalcohol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○
Metrex CaviWipes	Reiniging	○	
Metrex EmPower	Reiniging	○	
schülke mikrozid universal wipes (universele doekjes)	Reiniging	○	
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	○	○
Metrex CaviWipes1	Reiniging/laag	○	
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	●	○
Vernacare TUFFIE 5 universele ontsmettingsdoekjes	Reiniging/laag	○	
WIP'ANIOS EXCEL	Reiniging/laag	○	○
Diversey Accel INTERVention Wipes (doekjes)/Diversey Oxivir Tb Wipes (doekjes)	Laag	○	
schülke schülke mikrozid sensitive wipes (doekjes)	Laag	○	
Tristel Trio Wipes-systeem	Reiniging/hoog	○	○
ASP CIDEX OPA-desinfectiemiddel	Hoog	●	
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoog	●	

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

GlideScope-videomonitor, mobiele standaard, premium onderstel en voedingsadapter

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	GLIDESCOPE-VIDEOMONITOR	MOBIELE STANDAARD/PREMIUM ONDERSTEL	VOEDINGS-ADAPTER	EN-DOSCOOP-HOUDER	AVL-VIDEOBANTONHOUDER
Standaard compatibiliteit (cycli)		100	100	100	100	2000
Ecolab Incidin-systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	○		
Isopropylalcohol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	○	○	
Metrex CaviWipes	Reiniging	○	○			
PDI Sani-Cloth Plus Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging					○
Natriumhypochloriet (bleek; 0,16%/1600 ppm; toegepast met doekjes)	Reiniging		○			
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	○	○	○		
PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes met bleek)	Reiniging/laag	○				
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	○	○			
Virox Technologies Accel TB-doekjes	Reiniging/laag		○			
Clorox Bleach Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes met bleek)	Laag	○				
Diversey Accel INTERVention Wipes (doekjes)/Diversey Oxivir Tb Wipes (doekjes)	Laag	○	○			

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	GLIDESCOP-VIDEOMONITOR	MOBIELE STANDAARD/PREMIUM ONDERSTEL	VOEDINGS-ADAPTER	ENDOSCOOP-HOUDER	AVL-VIDEOBANDONHOUDER
Standaard compatibiliteit (cycli)		100	100	100	100	2000
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Laag	○				
Tristel Trio Wipes-systeem	Reiniging/hoog	○				

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

Kabels voor GlideScope Core-monitoren

PRODUCT	DESINFECTIE- NIVEAU	QUICKCON- NECT-KABEL	QUICKCON- NECT- KABEL VAN 2m	VIDEOKA- BEL	SMART CABLE
Standaard compatibiliteit (cycli)		1500	1500	1500	1500
ASP CIDEZYME/ENZOL Enzymatic Detergent (enzymatisch reinigingsmiddel)	Reiniging	●	●	●	●
Ecolab Incidin-systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	○	○
Ecolab OptiPro multi- enzymatisch laagschuimend reinigingsmiddel	Reiniging	○	○	○	○
HARTMANN Bacillol 30-tissues	Reiniging	○	○	○	○
Isopropylalcohol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	○	○
Metrex CaviWipes	Reiniging	○	○	○	○
PDI Sani-Cloth Plus Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging	○	○		
schülke perform (poederconcentraat)	Reiniging	○	○	○	○
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	○	○	○	○
Metrex CaviWipes1	Reiniging/laag	○	○	○	○
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	●	●	●	●
PDI Sani-Cloth Prime	Reiniging/laag	○	○	○	○
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	○	○	○	○
Vernacare TUFFIE 5 universele ontsmettingsdoekjes	Reiniging/laag	○	○	○	○
Anios OPASTER'ANIOS/ Farmec OPASTER	Hoog	●	●	●	●

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	QUICKCON-NECT-KABEL	QUICKCON-NECT-KABEL VAN 2m	VIDEOKABEL	SMART CABLE
Standaard compatibiliteit (cycli)		1500	1500	1500	1500
ASP CIDEX OPA-desinfectiemiddel	Hoog	●	●	●	●
Gioperacetic desinfectieoplossing	Hoog	○	○	○	○
STERRAD 50 STERRAD 200S (korte en standaardcycli) STERRAD 100S (korte cycli voor VS en andere regio's) STERRAD NX (standaardcyclus) STERRAD 100 NX (standaardcyclus) Allen maken gebruik van waterstofperoxidegasplasma	Sterilisatie	○ (100)	○ (100)	○ (100)	○ (100)

- Werkzaam en compatibel
- Compatibel

Kabels voor de GlideScope-videomonitor

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	VIDEOKABEL	SMART CABLE	QUICKCONNECT-KABEL
Standaard compatibiliteit (cycli)		3000	1500	1500
STERIS PRE-Klenz Instrument Transport Gel (transportgel voor instrumenten)	Voorreiniging	○	○	
BeliMed Protect Enzymatic Pretreatment Foam Spray (enzymatische schuimspray voor de voorbehandeling)	Voorreiniging	○ (1500)	○	
Anios Aniosyme XL3 enzymatisch reinigingsmiddel	Reiniging	○ (1500)	○	
ASP CIDEZYME/ENZOL Enzymatic Detergent (enzymatisch reinigingsmiddel)	Reiniging	○ (1500)	○	●
Belimed Protect Enzymatic Detergent (enzymatisch reinigingsmiddel)	Reiniging	○ (1500)	○	
Certol ProEZ enzymatische schuimspray	Reiniging	○ (500)	○ (500)	
Dr. Weigert neodisher MediClean forte	Reiniging	○ (1500)	○	
Ecolab enzymatisch reinigingsmiddel	Reiniging	○	○	
Ecolab Incidin-systeem voor droge doekjes (compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	
Ecolab MetalClean Plus	Reiniging	○ (1500)	○	
Ecolab OptiPro-gel voor vooraf reinigen van instrumenten	Reiniging	○	○	
Ecolab OptiPro multi-enzymatisch laagschuimend reinigingsmiddel	Reiniging	●	●	○
Ecolab Sekusept Multienzyme (multi-enzym)	Reiniging	○	○	
Geringe Renuzyme-schuimspray	Reiniging	○	○	
Isopropylalcohol (IPA; 70%; gewone doekjes, compatibiliteit beoordeeld bij 1 minuut blootstelling)	Reiniging	○	○	
Metrex CaviCide	Reiniging	●	●	
Metrex CaviWipes	Reiniging	●	●	○
Metrex EmPower	Reiniging	●	●	
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging	●	●	○
PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes met bleek)	Reiniging	● (1500)	●	
PDI Sani-Cloth Active Wipes (doekjes)	Reiniging	●	●	
Pro-Line Solutions EcoZyme	Reiniging	●	●	

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	VIDEOKABEL	SMART CABLE	QUICKCONNECT-KABEL
Standaard compatibiliteit (cycli)		3000	1500	1500
Ruhof Prepzyme	Reiniging	○	○	
schülke thermosept ER	Reiniging	○ (1500)	○	
STERIS eSENTIALS Concentrates	Reiniging	○	○	
STERIS Prolystica 2x geconcentreerd enzymatisch week- en reinigingsmiddel	Reiniging	●	●	
STERIS Revital-Ox 2x Concentrate PowerLift Cleaning Technology Enzymatic Detergent (enzymatisch reinigingsmiddel)	Reiniging	○ (1500)	○	
Getinge Tec Wash III	Reiniging	●	○	
WIP'ANIOS PREMIUM	Reiniging	●	●	
B. Braun Meliseptol HBV Tissues (doekjes)	Reiniging/laag	○ (1500)	○	
Universele Clinell-doekjes	Reiniging/laag	●	●	○
Dr. Schumacher DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (doekjes)	Reiniging/laag	○ (1500)	○	
Ecolab Sekusept PLUS	Reiniging/laag	○ (1500)	○	
Metrex CaviWipes1	Reiniging/laag	●	●	
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Reiniging/laag	○	○	
Vernacare TUFFIE 5 universele ontsmettingsdoekjes	Reiniging/laag		○	
Clorox Bleach Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes met bleek)	Laag	●	●	
Diversey Accel INTERvention Wipes (doekjes)/ Diversey Oxivir Tb Wipes (doekjes)	Laag	○ (1500)	○	
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes)	Laag	●	●	
PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Wipes (kiemdodende doekjes met bleek)	Laag	● (1500)	●	
Tristel Trio Wipes-systeem	Reiniging/hoog	●	●	
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoog	●	●	
ASP CIDEX Activated Dialdehyde Solution (ADS) (geactiveerde dialdehydeoplossing)	Hoog	●		
ASP CIDEX OPA-desinfectiemiddel	Hoog	●	●	
Cantel (MEDIVATORS) geautomatiseerde herverwerkers voor endoscopen: CER Optima 1 & 2 DSD-201 SSD-102	Hoog	● (100)		

- Werkzaam en compatibel
○ Compatibel

PRODUCT	DESINFECTIE-NIVEAU	VIDEOKABEL	SMART CABLE	QUICKCONNECT-KABEL
Standaard compatibiliteit (cycli)		3000	1500	1500
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide OPA/28	Hoog	●	●	
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide PA 30 °C in Cantel Advantage Plus-herverwerkingssysteem voor endoscopen	Hoog	● (100)	● (100)	
Metrex MetriCide 28	Hoog	●		
Metrex MetriCide OPA Plus	Hoog	●	●	
STERIS Resert XL HLD	Hoog	●	○	
STERIS Revital-Ox Resert XL HLD	Hoog	●	○	
STERIS Revital-Ox Resert XL HLD/chemisch steriliserend middel	Hoog	●	○	
Sultan Healthcare Sporox II	Hoog	●	○	
Anios Anioxyde 1000-desinfectiemiddel van hoog niveau en koud sterilisatiemiddel	Hoog/ sterilisatie	○	○	
STERIS S40 of S20 in één van de volgende: System 1 E System 1 System 1 Express System 1 Plus	Hoog/ sterilisatie	● (600)	● (750)	
Ethyleenoxide (EO)	Sterilisatie	● (100)		
STERIS V-PRO-systemen voor sterilisatie bij lage temperatuur: V-PRO 1 V-PRO 1 Plus V-PRO maX V-PRO 60 Allen maken gebruik van STERIS VAPROX HC	Sterilisatie	● (125)	● (100)	
STERRAD 50 STERRAD 200S (korte en standaardcycli) STERRAD 100S (korte cycli voor VS en andere regio's) STERRAD NX (standaardcyclus) STERRAD 100 NX (standaardcyclus) Allen maken gebruik van waterstofperoxidegasplasma	Sterilisatie	● (125)	● (100)	

Woordenlijst

In de onderstaande tabel vindt u definities van specialistische termen die in dit document of op het product zelf worden gebruikt. Zie voor een volledige lijst van de aandachtspunten, waarschuwingen en informatiesymbolen voor deze en andere producten van Verathon de Symbolengids van Verathon op verathon.com/service-and-support/symbols.

TERM	DEFINITIE
AER	Geautomatiseerde herverwerker endoscoop
C	Celsius
CFR	Code of Federal Regulations (VS)
cm	Centimeter
CSA	Canadian Standards Association
DL	Directe laryngoscopie
Essentiële prestaties	De systeemprestaties die nodig zijn om onacceptabele risico's weg te nemen
F	Fahrenheit
g	Gram
HDMI	High-definition multimedia interface
herverwerking	Een herbruikbare component voor het volgende gebruik prepareren. Herverwerking omvat reiniging, desinfectie en sterilisatie, voor zover van toepassing.
hPa	Hectopascal
in	Inch
IPA	Isopropylalcohol
ISO	International Standards Organization (Internationale Organisatie voor Normalisatie).
kPa	Kilopascal
l	Liter
lbs	Pond
m	Meter
MDD	Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen
ml	Milliliter
mm	Millimeter
mmHg	Millimeter kwik
MSDS	Material Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad voor materialen)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (overheidsinstantie in de VS)
psia	Pond per vierkante inch, absolute (pounds per square inch absolute)
RV	Relatieve vochtigheid
SDS	Natriumdodecylsulfaat

verathon